


CompoRoller™

Pat. pending

US: Rx only

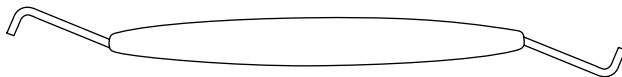

Art. No. 5302
Ø 4 mm



Art. No. 5304
Ø 3 mm



Art. No. 5303



Art. No. 5305



Art. No. 5306



Art. No. 5307



Art. No. 5308



GB **Indication:** CompoRoller facilitates the application of thin, even layers of composite using the unique rolling action of the tips.

DE **Indikation:** CompoRoller vereinfacht die Applikation von Composite in dünnen, gleichmässigen Schichten dank der einzigartigen Roll-Aufsätze.

FR **Indication :** CompoRoller facilite l'application de fines couches uniformes de composite grâce à l'action des pointes roulantes.

IT **Indicazione:** CompoRoller facilita l'applicazione di composito a strati sottili ed uniformi grazie all'esclusiva azione rotante dei puntali.

ES **Indicación:** con el CompoRoller se puede aplicar el material composite en capas delgadas y uniformes, gracias a la acción de su extraordinaria punta giratoria.

PT **Indicação:** O CompoRoller é uma ferramenta que permite a aplicação de camadas finas e niveladas de material compósito graças à acção única da sua ponta giratória.

NL **Indicatie:** Met de CompoRoller kan composietmateriaal in dunne, gelijkmatige lagen worden aangebracht – de unieke rolpunt maakt dit mogelijk.

DK **Indikation:** CompoRoller kan ved hjælp af den enestående rullespids smøre kompositmateriale på underlaget i tynde, ensartede lag.

FI **Indikaatio:** CompoRoller mahdollistaa ainutlaatuisen pyörivän teränsä ansiosta yhdistelmämuovin levittämisen ohuin ja tasaisin kerroksin.

SE **Indikation:** Kompositmaterialet kan appliceras i tunna, jämna skikt med CompoRoller, den unika rullande spetsen underlättar appliceringen.

NO **Indikasjon:** Med CompoRoller kan komposittmaterialet påføres i tynne, jevne lag – takket være den unike rullespissen.

GR **Ένδειξη:** Με το CompoRoller μπορεί να διενεργηθεί επίστρωση συγκολλητικού υλικού σε ομοιόμορφες στρώσεις - χάρη στη μοναδική αιχμή Roll.

- PL** **Wskazanie:** Przy pomocy CompoRoller-a możliwe jest nakładanie cienkich, równomiernych warstw materiału kompozytowego dzięki zastosowaniu jedynej w swoim rodzaju końcówki obrotowej.
- HU** **Indikáció:** a CompoRoller lehetősé teszi kompozitok vékony, egyenletes rétegekben való felvitelét – a csúcsok egyedi görgős mechanizmusának köszönhetően.
- CZ** **Indikace:** Pomocí nástroje CompoRoller se může nanést kompozitní materiál v tenkých, rovnoměrných vrstvách, co umožňuje jedinečná rolující špička.
- SK** **Indikácia:** Pomocou nástroja CompoRoller možno nanášať kompozitný materiál v tenkých, rovnomerných vrstvách, čo umožňuje jedinečná rolujúca špička.
- RO** **Indicație:** CompoRoller facilitează aplicarea materialului compozit în straturi subțiri, uniforme datorită acțiunii unice a vârfului rotativ.
- BG** **Показания:** CompoRoller улеснява нанасянето на композиционния материал на тънки, равни слоеве, благодарение на изключителния въртящ се накрайник.
- RU** **Показание:** CompoRoller облегчает нанесение композита тонким, ровным слоем, благодаря исключительно прокатывающему действию наконечника.
- EE** **Näidustus:** CompoRoller'iga saab komposiitmaterjali kanda peale õhukese, ühtlase kihina – ainulaadne rullotsik võimaldab seda.
- LT** **Indikacija:** voleliu „CompoRoller“ kompozitą galima užtepti plonais, tolygiais sluoksniais. Tai leidžia padaryti unikalus volelio galiukas.
- LV** **Norādījumi:** CompoRoller nodrošina maisījuma plānas, vienmērīgas kārtas uzklāšanos, kas tiek panākts ar uzgaļu unikālo spēju rotēt.
- SI** **Indikacija:** S CompoRoller-jem lahko nanašate kompozit v tankih, enakomernih slojih, kar omogoča edinstvena kotalna konica.
- TR** **Endikasyon:** CompoRoller'i eşsiz kılan döner uç sayesinde, kompozit materyalleri, ince ve eşit tabakalar halinde uygulanabilir.
- AE** **الإستعمال:** يُمكن بواسطة CompoRoller توزيع المواد المركّبة بطبقات رقيقة ومتساوية بفضل رأس أسطوانة التسوية الوحيد من نوعه.